



TOUT TÉLÉCHARGER

Océan



Master-C Ø 4,00 mm 2

Master-C Ø 4,00 mm 6

Lilas



Master-C Ø 4,50 mm 10

Master-C Ø 5,00 mm 14



DOWNLOAD ALL

Ocean



Master-C Ø 3,50 mm 4

Master-C Ø 4,00 mm 8

Lilac




Master-C Ø 4,50 mm 12

Master-C Ø 5,00 mm 16


Références	Ø A	Ø B	Ø C	L
MC35-8.5	3.10 mm	3.50 mm	1.50 mm	8.5 mm
MC35-10				10 mm
MC35-11.5				11.5 mm
MC35-13				13 mm
MC35-15				15 mm

Connexion Océan

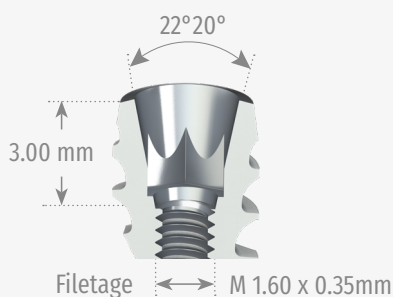


Connexion conique indexée par un hexagone 2.09 mm.

Switching platform : conservation du capital osseux et préservation de la géométrie et du volume des papilles.

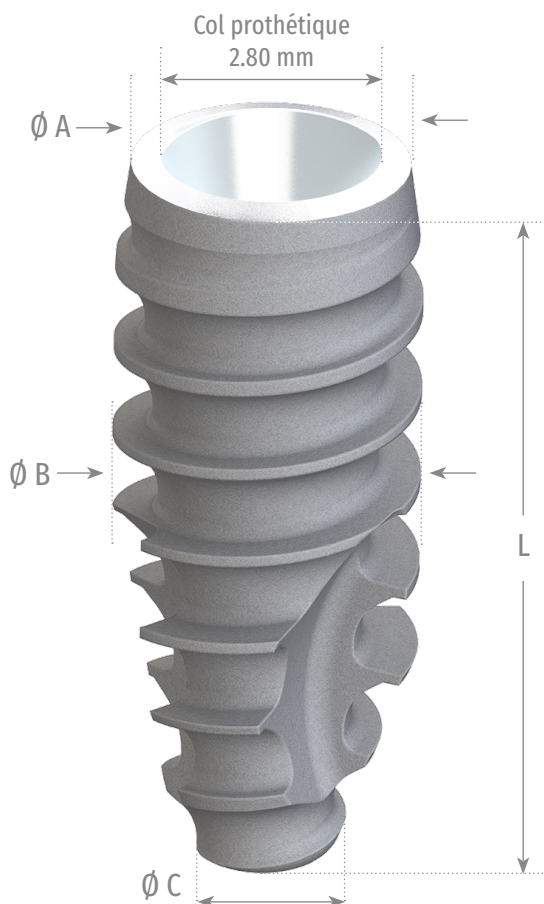

Matériau	Alliage de titane TA6V ELI F136 - EN ISO 5832-3/ASTM F136
Traitement de surface	Microsablage particules Al ² O ₃
Etat de surface	Rugosité : Ra 1.10 µm / 1.40 µm

Indications

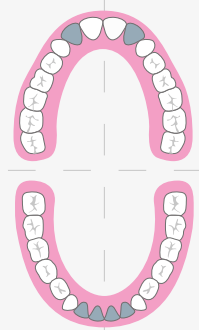

- Pour le remplacement des incisives mandibulaire et incisives latérales maxillaire.
- Stabilisation d'une prothèse amovible ou fixe (unitaire ou intercalaire). Le volume et la qualité osseuse doivent être suffisants pour supporter les implants.

Mise en place de l'implant infra-osseux jusqu'à 1 mm maxi.

Livré en standard avec

- Vis de cicatrisation anodisée «Océan» Ø 3.80 mm - H 4.00 mm Réf. VCI384-OM
- Vis de couverture anodisée «Océan» auto-cassante.



Protocole de forage (code couleur blanc)

Densité : **D4** **D3** **D2** **D1**

	FP1		Ø 2.00 / 2.70 mm	1200 à 1500 tr/min.				
	FW-2.85		Ø 2.85 mm	600 à 800 tr/min.				
	FC35		Ø 3.25 mm	400 à 600 tr/min.				

Sur 2mm Sur 3mm

Préconisation de forage : **Sous irrigation constante.**


Préconisation du couple de forage : **5 à 10 N.cm.** Si le foret bloque à 10 N.cm, prévoir son remplacement.

⚠ La pointe du foret a une longueur de **1.00 mm**. Cette valeur doit être prise en compte au moment du forage en plus de la longueur de l'implant. Les valeurs **D1** à **D4** indiquent les densités pour lesquelles le foret peut être utilisé. N'utilisez pas une vitesse de rotation (en tours par minute) située en dehors de la fourchette indiquée.

Préconisation de vissage de l'implant : **30 tr/min** sans irrigation.




Protocole de mise en place

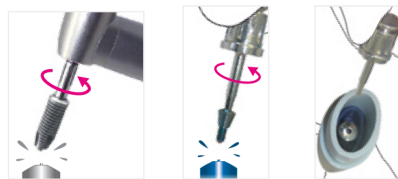


Système «No Touch»
implant et vis de couverture sécables.

Mise en place à l'aide des connecteurs «Océan» :

• **MPI21-C** ou **-L**
pour une mise en place au contre-angle.

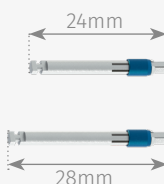

• **TMP21-C** ou **-L**
pour une mise en place manuelle.

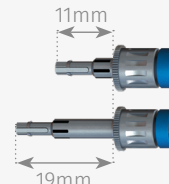

Etiquettes de traçabilité

REF: MC33-10 LOT: J050001
IMPLANT MASTER-C
Ø3.30 H=10 MM TAGV ELLI F336
www.easyimplant.com

Dossier patient /
correspondant

REF: MC33-10 LOT: J050001
IMPLANT MASTER-C
Ø3.30 H=10 MM TAGV ELLI F336
www.easyimplant.com

Carte Patient

REF: MC33-10 LOT: J050001
IMPLANT MASTER-C
Ø3.30 H=10 MM TAGV ELLI F336
www.easyimplant.com

Laboratoire
de prothèse

REF: MC33-10 LOT: J050001
IMPLANT MASTER-C
Ø3.30 H=10 MM TAGV ELLI F336
www.easyimplant.com

Bon de retour
pour garantie

Date: Site: Date: Site:

IMPLANT	IMPLANT
PROTHÈSE	PROTHÈSE

☐ Visable ☐ Scellée ☐ Amovible ☐ Visable ☐ Scellée ☐ Amovible
 Serrage prothèse: ☐ 15 ☐ 20 ☐ 25 N.cm Serrage prothèse: ☐ 15 ☐ 20 ☐ 25 N.cm

Chirurgie: Prothèse: Carte Patient:

Certifications & Normes

Visy satisfait à la norme ISO 13485 et à la directive européenne 93/42/CEE, permettant d'apposer sur tous nos dispositifs l'agrément CE 0051.



Garantie Easy Implant®

- Les produits Easy Implant® sont garantis 10 ans sans défaut de fabrication.
- L'acheteur reste seul responsable de l'utilisation qu'il fera des ces produits.
- Les pièces pourront, à la discrétion de Visy, être échangées ou remboursées.



55, rue Uranus - Z.A.C. Altaïs - 74650 CHAVANOD (France) - Tel. : +33 (0) 450 450 498

@ support.technique@visyimplant.com easyimplant.com / visyimplant.com



FABRIQUÉ EN FRANCE




MASTER-C $\varnothing 3.50$ mm



TECHNICAL SHEET Ref. MC35


References	$\varnothing A$	$\varnothing B$	$\varnothing C$	L
MC35-8.5	3.10 mm	3.50 mm	1.50 mm	8.5 mm
MC35-10				10 mm
MC35-11.5				11.5 mm
MC35-13				13 mm
MC35-15				15 mm

Ocean Platform

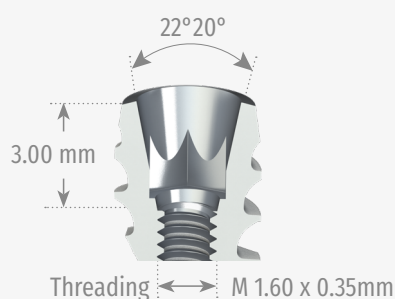


Conical connection indexed by a 2.09 mm hexagon.

The **Switching platform** allows to preserve the surrounding tissues which guarantees very good aesthetic results.

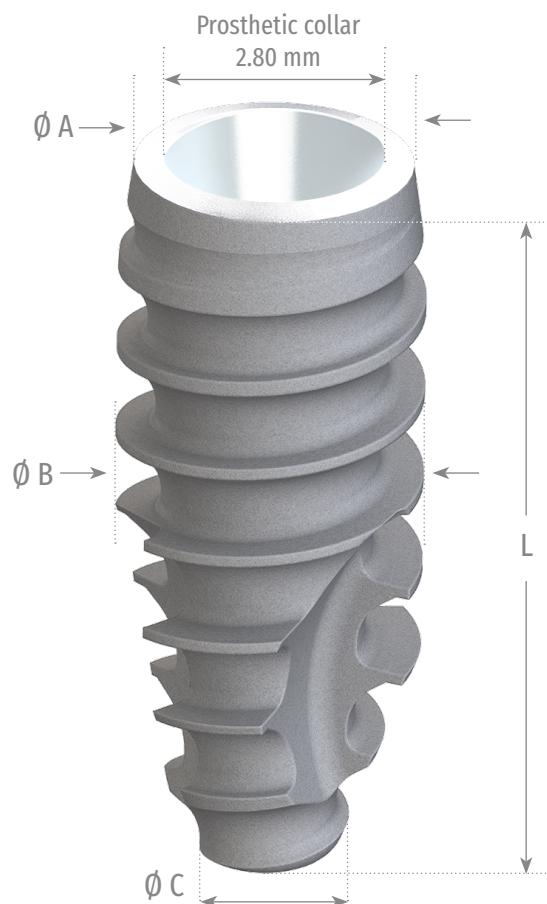

Material	Titanium alloy TA6V ELI F136 - EN ISO 5832-3/ASTM F136
Surface treatment	Sandblasted with fine particles of alumina oxide Al_2O_3
Surface state	Roughness: Ra 1.10 μm / 1.40 μm

Indications

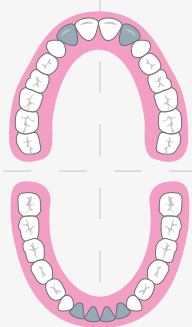

- For the replacement of the mandibular incisors and maxillary lateral incisors.
- Stabilization of a removable or fixed prosthesis (unitary or interleaved). The volume and bone quality must be sufficient to support the implants.

Placement of the infra-osseous implant up to 1 mm maximum.

Supplied as standard with

- Anodized healing screw «Ocean» $\varnothing 3.80$ mm - H 4.00 mm Ref. VCI384-OM
- «Ocean» anodized breakable cover screw





MASTER-C Ø 3.50 mm



TECHNICAL SHEET Ref. MC35

Drilling sequence (white color code)

Density: **D4** **D3** **D2** **D1**

	FP1		Ø 2.00 / 2.70 mm	1200 to 1500 RPM.				
	FW-2.85		Ø 2.85 mm	600 to 800 RPM.				
	FC35		Ø 3.25 mm	400 to 600 RPM.				

On 2mm On 3mm

Drilling recommendation: **Under continuous irrigation.**

Drilling torque recommendation: **5 to 10 N.cm.** If the drill bit blocks at 10 N.cm, plan to replace it.


⚠ The tip of the drill bit has a length of **1.00 mm**. This value must be taken into account during drilling in addition to the length of the implant. The values **D1** to **D4** indicate the densities for which the drill can be used.

Do not use a rotational speed (in revolutions per minute) outside the indicated range.

Implant insertion recommendation: **30 RPM** without irrigation.




Placement protocol

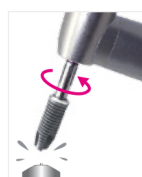


«No Touch» System
Breakable implant and cover screw.

Placement using «Ocean» implant mounts:

• **MPI21-C** or **-L**
Contra-angle placement.

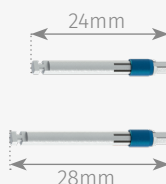

• **TMP21-C** or **-L**
Manual placement.

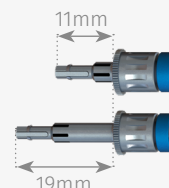

Traceability labels

REF: MC33-10 LOT: J0100011
IMPLANT MASTER-C
Ø3.30 H=10 MM TAGV ELI F336
www.easymplant.com

Patient record /
surgeon

REF: MC33-10 LOT: J0100011
IMPLANT MASTER-C
Ø3.30 H=10 MM TAGV ELI F336
www.easymplant.com

Patient Card

REF: MC33-10 LOT: J0100011
IMPLANT MASTER-C
Ø3.30 H=10 MM TAGV ELI F336
www.easymplant.com

Prosthesis
laboratory

REF: MC33-10 LOT: J0100011
IMPLANT MASTER-C
Ø3.30 H=10 MM TAGV ELI F336
www.easymplant.com

Return form
for warranty



Certifications & Standards

Visy is **NF EN ISO 13485: 2016** certified and holder of **EC certificate** delivered by its notified body for the **93/42/CE** directive.

All products are subject to change without notice.



Easy Implant® Warranty

- Easy Implant® products have a 10 years warranty, free from manufacturing defects.
- The buyer remains solely responsible for the use he makes of the products.
- Every component replacements are left to Visy discretion.



Visy Implant

55, rue Uranus - Z.A.C. Altaïs - 74650 CHAVANOD (France) - Tel.: +33 (0) 450 450 498


@ support.technique@visyimplant.com easyimplant.com / visyimplant.com



MADE IN FRANCE


Références	Ø A	Ø B	Ø C	L
MC40-7	3.60 mm	4.00 mm	2.10 mm	7 mm
MC40-8.5				8.5 mm
MC40-10				10 mm
MC40-11.5				11.5 mm
MC40-13				13 mm

Connexion Océan

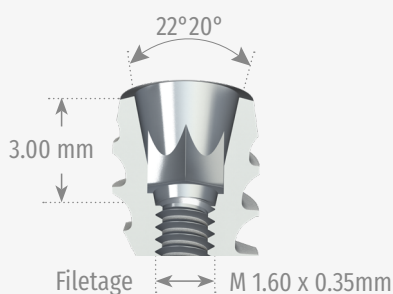


Connexion conique indexée par un hexagone 2.09 mm.

Switching platform : conservation du capital osseux et préservation de la géométrie et du volume des papilles.

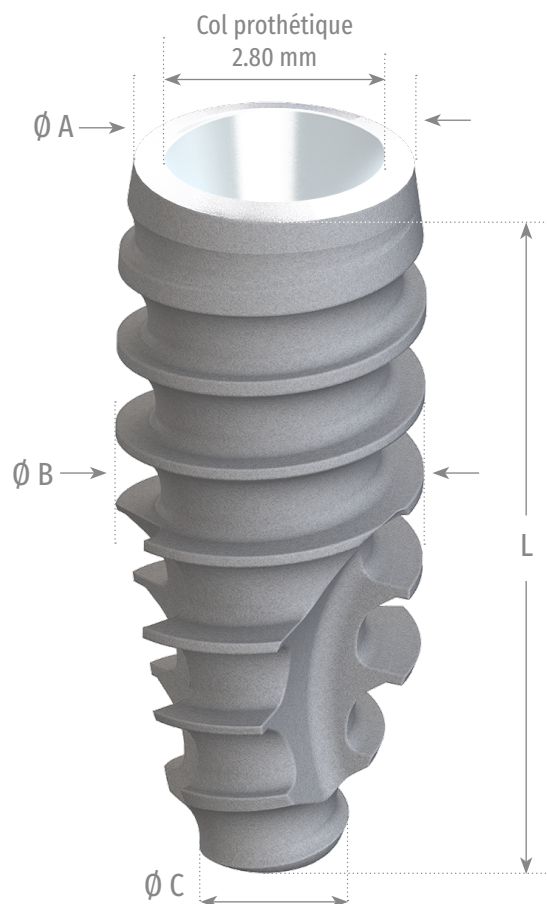

Matériau	Alliage de titane TA6V ELI F136 - EN ISO 5832-3/ASTM F136
Traitement de surface	Microsablage particules Al ² O ₃
Etat de surface	Rugosité : Ra 1.10 µm / 1.40 µm

Indications

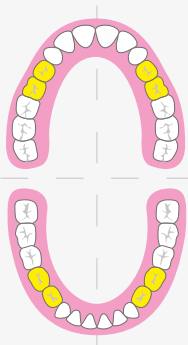

- Pour le remplacement des prémolaires mandibulaire et maxillaire.
- Stabilisation d'une prothèse amovible ou fixe (unitaire ou intercalaire). Le volume et la qualité osseuse doivent être suffisants pour supporter les implants.

Mise en place de l'implant infra-osseux jusqu'à 1 mm maxi.

Livré en standard avec

- Vis de cicatrisation anodisée «Océan» Ø 4.50 mm - H 4.00 mm Réf. VCI454-OM
- Vis de couverture anodisée «Océan» auto-cassante.



Protocole de forage (code couleur jaune)

Densité : **D4** **D3** **D2** **D1**

	FP1		Ø 2.00 / 2.70 mm	○ 1200 à 1500 tr/min.				
	FY-3.00		Ø 3.00 mm	○ 600 à 800 tr/min.				
	FY-3.25		Ø 3.25 mm	○ 600 à 800 tr/min.				
	FC40		Ø 3.75 mm	○ 400 à 600 tr/min.			 Sur 2mm	 Sur 3mm


Préconisation de forage : **Sous irrigation constante.**

Préconisation du couple de forage : **5 à 10 N.cm.** Si le foret bloque à 10 N.cm, prévoir son remplacement.

⚠ La pointe du foret a une longueur de **1.00 mm**. Cette valeur doit être prise en compte au moment du forage en plus de la longueur de l'implant. Les valeurs **D1** à **D4** indiquent les densités pour lesquelles le foret peut être utilisé. N'utilisez pas une vitesse de rotation (en tours par minute) située en dehors de la fourchette indiquée.

Préconisation de vissage de l'implant : **30 tr/min** sans irrigation.


Protocole de mise en place

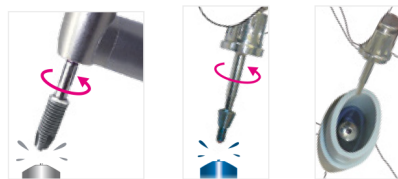


Système «No Touch»
implant et vis de couverture sécables.

Mise en place à l'aide des connecteurs «Océan» :


• **MPI21-C** ou **-L**
pour une mise en place au contre-angle.

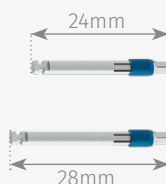

• **TMP21-C** ou **-L**
pour une mise en place manuelle.

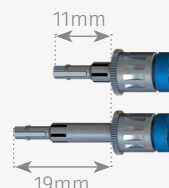

Etiquettes de traçabilité

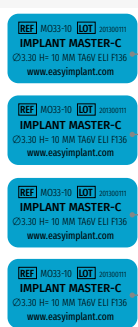

Dossier patient /
correspondant

Carte Patient

Laboratoire
de prothèse

Bon de retour
pour garantie



Certifications & Normes

Visy satisfait à la norme ISO 13485 et à la directive européenne 93/42/CEE, permettant d'apposer sur tous nos dispositifs l'agrément CE 0051.



Garantie Easy Implant®

- Les produits Easy Implant® sont garantis 10 ans sans défaut de fabrication.
- L'acheteur reste seul responsable de l'utilisation qu'il fera des ces produits.
- Les pièces pourront, à la discrétion de Visy, être échangées ou remboursées.



55, rue Uranus - Z.A.C. Altaïs - 74650 CHAVANOD (France) - Tel. : +33 (0) 450 450 498

@ support.technique@visyimplant.com easyimplant.com / visyimplant.com



FABRIQUÉ EN FRANCE




MASTER-C $\varnothing 4.00$ mm



TECHNICAL SHEET Ref. MC40


References	$\varnothing A$	$\varnothing B$	$\varnothing C$	L
MC40-7	3.60 mm	4.00 mm	2.10 mm	7 mm
MC40-8.5				8.5 mm
MC40-10				10 mm
MC40-11.5				11.5 mm
MC40-13				13 mm

Ocean Platform

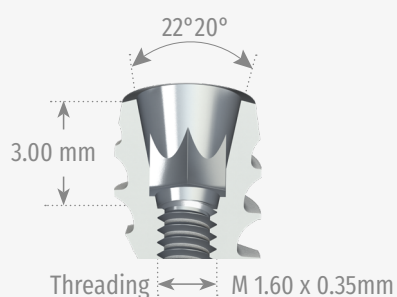


Conical connection indexed by a 2.09 mm hexagon.

The **Switching platform** allows to preserve the surrounding tissues which guarantees very good aesthetic results.

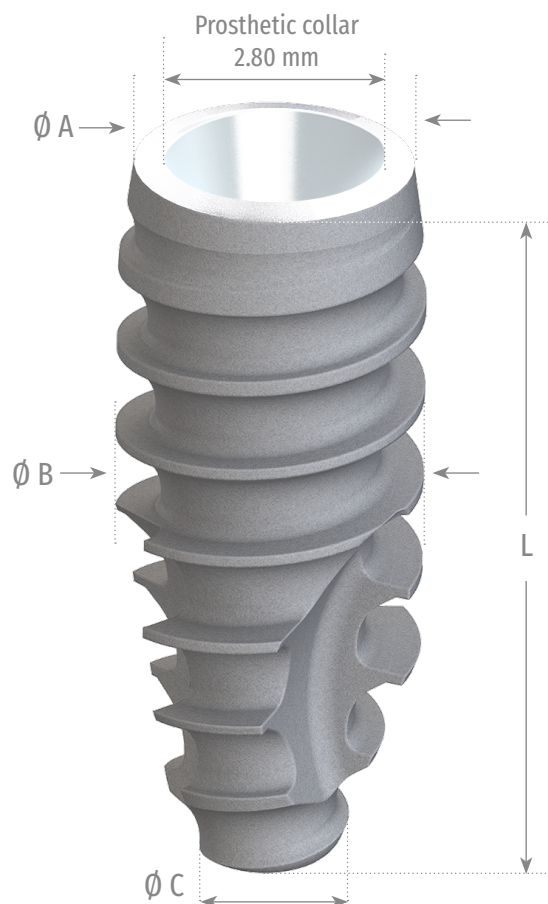

Material	Titanium alloy TA6V ELI F136 - EN ISO 5832-3/ASTM F136
Surface treatment	Sandblasted with fine particles of alumina oxide Al_2O_3
Surface state	Roughness: Ra 1.10 μm / 1.40 μm

Indications

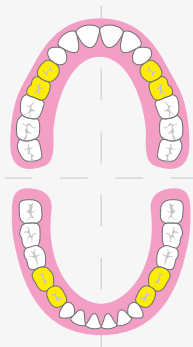

- For the replacement of the mandibular and maxillary premolars.
- Stabilization of a removable or fixed prosthesis (unitary or interleaved). The volume and bone quality must be sufficient to support the implants.

Placement of the infra-osseous implant up to 1 mm maximum.

Supplied as standard with

- Anodized healing screw «Ocean» $\varnothing 4.50$ mm - H 4.00 mm Ref. VCI454-OM
- «Ocean» anodized breakable cover screw





MASTER-C Ø 4.00 mm



TECHNICAL SHEET Ref. MC40

Drilling sequence (yellow color code)

Density: D4 D3 D2 D1

	FP1		Ø 2.00 / 2.70 mm	1200 to 1500 RPM.				
	FY-3.00		Ø 3.00 mm	600 to 800 RPM.				
	FY-3.25		Ø 3.25 mm	600 to 800 RPM.				
	FC40		Ø 3.75 mm	400 to 600 RPM.				

On 2mm On 3mm

Drilling recommendation: **Under continuous irrigation.**

Drilling torque recommendation: **5 to 10 N.cm.** If the drill bit blocks at 10 N.cm, plan to replace it.


⚠ The tip of the drill bit has a length of **1.00 mm**. This value must be taken into account during drilling in addition to the length of the implant. The values **D1 to D4** indicate the densities for which the drill can be used.

Do not use a rotational speed (in revolutions per minute) outside the indicated range.

Implant insertion recommendation: **30 RPM** without irrigation.




Placement protocol

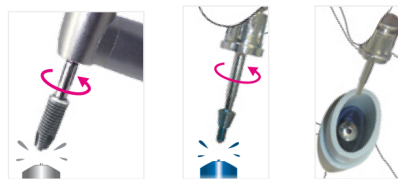


«No Touch» System
Breakable implant and cover screw.

Placement using «Ocean» implant mounts:

• **MPI21-C or -L**
Contra-angle placement.

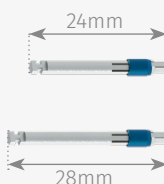

• **TMP21-C or -L**
Manual placement.

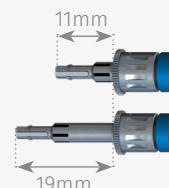

Traceability labels



Patient record / surgeon



Patient Card



Prosthesis laboratory



Return form for warranty



Certifications & Standards

Visy is **NF EN ISO 13485: 2016** certified and holder of **EC certificate** delivered by its notified body for the **93/42/CE** directive.

All products are subject to change without notice.



Easy Implant® Warranty

- Easy Implant® products have a 10 years warranty, free from manufacturing defects.
- The buyer remains solely responsible for the use he makes of the products.
- Every component replacements are left to Visy discretion.



Visy Implant

55, rue Uranus - Z.A.C. Altaïs - 74650 CHAVANOD (France) - Tel.: +33 (0) 450 450 498


@ support.technique@visyimplant.com easyimplant.com / visyimplant.com



MADE IN FRANCE


Références	Ø A	Ø B	Ø C	L
MC45-7	4.10 mm	4.50 mm	2.50 mm	7 mm
MC45-8.5				8.5 mm
MC45-10				10 mm
MC45-11.5				11.5 mm
MC45-13				13 mm

Connexion LILAS

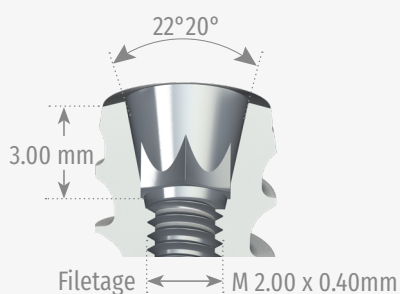


Connexion conique indexée par un hexagone 2.48 mm.

Switching platform : conservation du capital osseux et préservation de la géométrie et du volume des papilles.

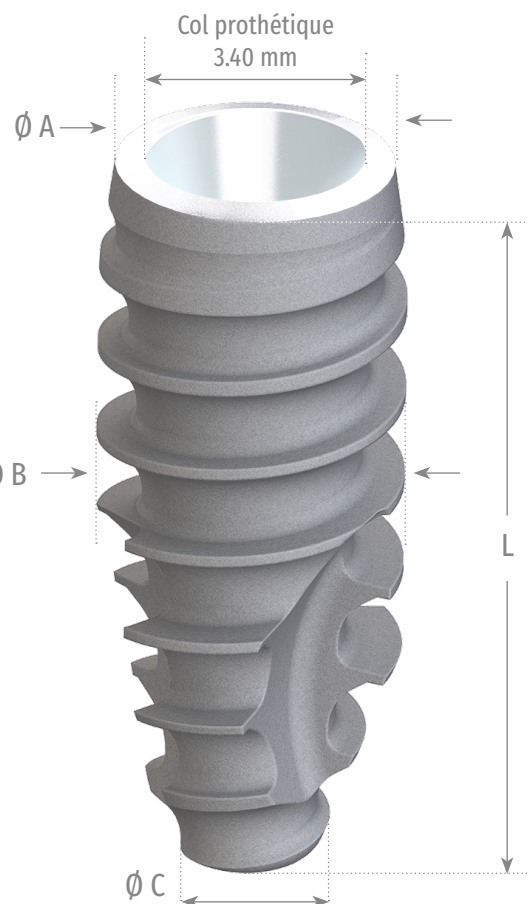

Matériau	Alliage de titane TA6V ELI F136 - EN ISO 5832-3/ASTM F136
Traitement de surface	Microsablage particules Al ² O ₃
Etat de surface	Rugosité : Ra 1.10 µm / 1.40 µm

Indications

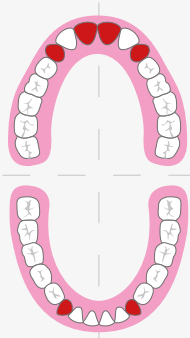

- Pour le remplacement des canines mandibulaire et maxillaire, ainsi que les incisives centrales maxillaire.
- Stabilisation d'une prothèse amovible ou fixe (unitaire ou intercalaire). Le volume et la qualité osseuse doivent être suffisants pour supporter les implants.

Mise en place de l'implant infra-osseux jusqu'à 1 mm maxi.

Livré en standard avec

- Vis de cicatrisation anodisée «Lilas» Ø 4.80 mm - H 4.00 mm Réf. VCI484-CM
- Vis de couverture anodisée «Lilas» auto-cassante.



Protocole de forage (code couleur rouge)

Densité : **D4** **D3** **D2** **D1**

	FP1		Ø 2.00 / 2.70 mm	1200 à 1500 tr/min.				
	FRB-3.35		Ø 3.35 mm	600 à 800 tr/min.				
	FRB-3.50		Ø 3.50 mm	600 à 800 tr/min.				
	FRB-3.70		Ø 3.70 mm	600 à 800 tr/min.				
	FC45		Ø 4.25 mm	400 à 600 tr/min.				

Sur 2mm Sur 3mm

Préconisation de forage : **Sous irrigation constante.**

Préconisation du couple de forage : **5 à 10 N.cm.** Si le foret bloque à 10 N.cm, prévoir son remplacement.

⚠ La pointe du foret a une longueur de **1.00 mm**. Cette valeur doit être prise en compte au moment du forage en plus de la longueur de l'implant. Les valeurs **D1** à **D4** indiquent les densités pour lesquelles le foret peut être utilisé.

N'utilisez pas une vitesse de rotation (en tours par minute) située en dehors de la fourchette indiquée.

Préconisation de vissage de l'implant : **30 tr/min** sans irrigation.




Protocole de mise en place




Système «No Touch»
implant et vis de couverture sécables.

Mise en place à l'aide des connecteurs «Lilas» :

• **MPI25-C** ou **-L**
pour une mise en place au contre-angle.

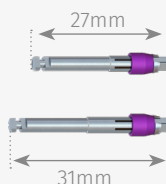

• **TMP25-C** ou **-L**
pour une mise en place manuelle.

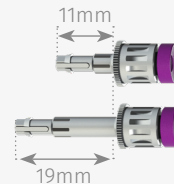

Etiquettes de traçabilité

REF: MS47-13 LOT: 20130999
IMPLANT MASTER-C
Ø4.75 H= 13 MM 1000 EU F136
www.easyimplant.com

Dossier patient /
correspondant

REF: MS47-13 LOT: 20130999
IMPLANT MASTER-C
Ø4.75 H= 13 MM 1000 EU F136
www.easyimplant.com

Carte Patient

REF: MS47-13 LOT: 20130999
IMPLANT MASTER-C
Ø4.75 H= 13 MM 1000 EU F136
www.easyimplant.com

Laboratoire
de prothèse

REF: MS47-13 LOT: 20130999
IMPLANT MASTER-C
Ø4.75 H= 13 MM 1000 EU F136
www.easyimplant.com

Bon de retour
pour garantie

Date: Site:

IMPLANT	IMPLANT
PROTHÈSE	PROTHÈSE

☐ Visable ☐ Scellée ☐ Amovible ☐ Visable ☐ Scellée ☐ Amovible
 Serrage prothèse: ☐ 15 ☐ 20 ☐ 25 N.cm Serrage prothèse: ☐ 15 ☐ 20 ☐ 25 N.cm

Chirurgie: Prothèse: Carte Patient:

Certifications & Normes

Visy satisfait à la norme **ISO 13485** et à la directive européenne **93/42/CEE**, permettant d'apposer sur tous nos dispositifs l'agrément **CE 0051**.

CE 0051

ISO
13485

Garantie Easy Implant®

- Les produits Easy Implant® sont garantis 10 ans sans défaut de fabrication.
- L'acheteur reste seul responsable de l'utilisation qu'il fera des ces produits.
- Les pièces pourront, à la discrétion de Visy, être échangées ou remboursées.



 Visy Implant

55, rue Uranus - Z.A.C. Altaïs - 74650 CHAVANOD (France) - Tel. : +33 (0) 450 450 498

@ support.technique@visyimplant.com easyimplant.com / visyimplant.com



FABRIQUÉ EN FRANCE




MASTER-C Ø 4.50 mm



TECHNICAL SHEET Ref. MC45


References	Ø A	Ø B	Ø C	L
MC45-7	4.10 mm	4.50 mm	2.50 mm	7 mm
MC45-8.5				8.5 mm
MC45-10				10 mm
MC45-11.5				11.5 mm
MC45-13				13 mm

LILAC Platform

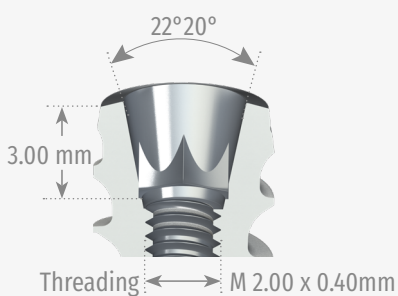


Conical connection indexed by a 2.48 mm hexagon.

The **Switching platform** allows to preserve the surrounding tissues which guarantees very good aesthetic results.

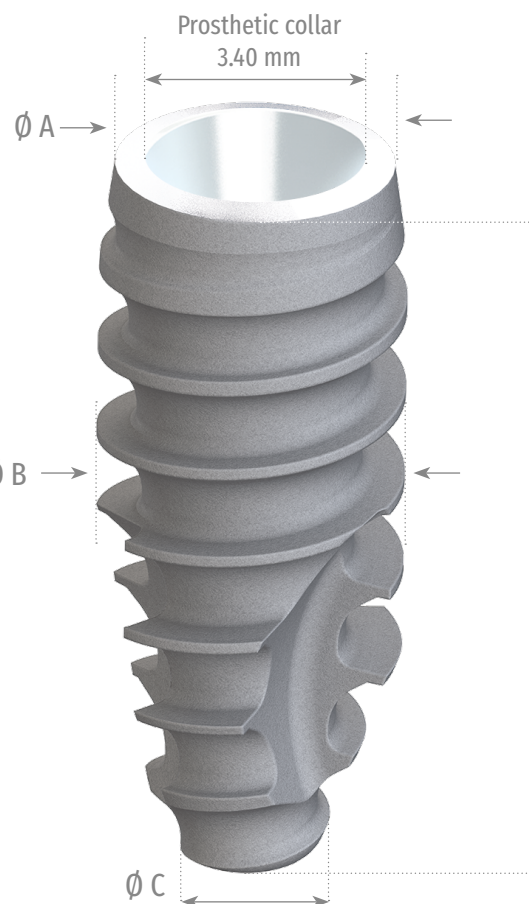

Material	Titanium alloy TA6V ELI F136 - EN ISO 5832-3/ASTM F136
Surface treatment	Microblasting particles Al ₂ O ₃
Surface condition	Roughness: Ra 1.10 µm / 1.40 µm

Indications

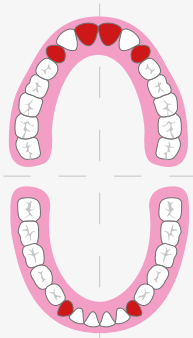

Placement of the infra-osseous implant up to 1 mm maximum.

- For the replacement of the mandibular and maxillary canines, as well as the maxillary central incisors.
- Stabilization of a removable or fixed prosthesis (unitary or interleaved). The volume and bone quality must be sufficient to support the implants.

Supplied as standard with

- Anodized healing screw «Lilac»
Ø 4.80 mm - H 4.00 mm
Ref. VCI484-CM
- «Lilac» anodized breakable cover screw





MASTER-C Ø 4.50 mm



TECHNICAL SHEET Ref. MC45

Drilling sequence (red color code)

Density: **D4** **D3** **D2** **D1**

	FP1		Ø 2.00 / 2.70 mm	○ 1200 to 1500 RPM.				
	FRB-3.35		Ø 3.35 mm	○ 600 to 800 RPM.				
	FRB-3.50		Ø 3.50 mm	○ 600 to 800 RPM.				
	FRB-3.70		Ø 3.70 mm	○ 600 to 800 RPM.				
	FC45		Ø 4.25 mm	○ 400 to 600 RPM.				

On 2mm On 3mm

Drilling recommendation: **Under continuous irrigation.**

Drilling torque recommendation: **5 to 10 N.cm.** If the drill bit blocks at 10 N.cm, plan to replace it.

⚠ The tip of the drill bit has a length of **1.00 mm**. This value must be taken into account during drilling in addition to the length of the implant. The values **D1** to **D4** indicate the densities for which the drill can be used.

Do not use a rotational speed (in revolutions per minute) outside the indicated range.

Implant insertion recommendation: **30 RPM** without irrigation.




Placement protocol




«No Touch» System
Breakable implant and cover screw.

Placement using «Lilac» implant mounts:

• **MPI25-C** or **-L**
fContra-angle placement.

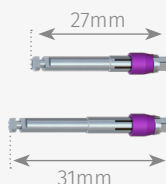

• **TMP25-C** or **-L**
Manual placement.

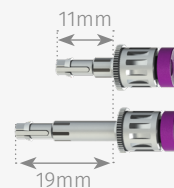

Traceability labels



Patient record /
surgeon



Patient Card



Prosthesis
laboratory



Return form
for warranty



Certifications & Standards

Visy is **NF EN ISO 13485: 2016** certified and holder of **EC certificate** delivered by its notified body for the **93/42/CE** directive.

All products are subject to change without notice.



Easy Implant® Warranty

- Easy Implant® products have a 10 years warranty, free from manufacturing defects.
- The buyer remains solely responsible for the use he makes of the products.
- Every component replacements are left to Visy discretion.



Visy Implant

55, rue Uranus - Z.A.C. Altaïs - 74650 CHAVANOD (France) - Tel.: +33 (0) 450 450 498

@ support.technique@visyimplant.com easyimplant.com / visyimplant.com



MADE IN FRANCE




MASTER-C Ø 5.00 mm



FICHE TECHNIQUE Réf. MC50


Références	Ø A	Ø B	Ø C	L
MC50-7	4.60 mm	5.00 mm	3.00 mm	7 mm
MC50-8.5				8.5 mm
MC50-10				10 mm
MC50-11.5				11.5 mm
MC50-13				13 mm

Connexion LILAS

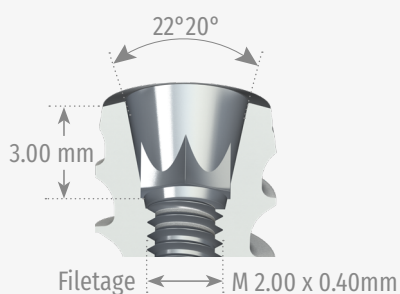


Connexion conique indexée par un hexagone 2.48 mm.

Switching platform : conservation du capital osseux et préservation de la géométrie et du volume des papilles.

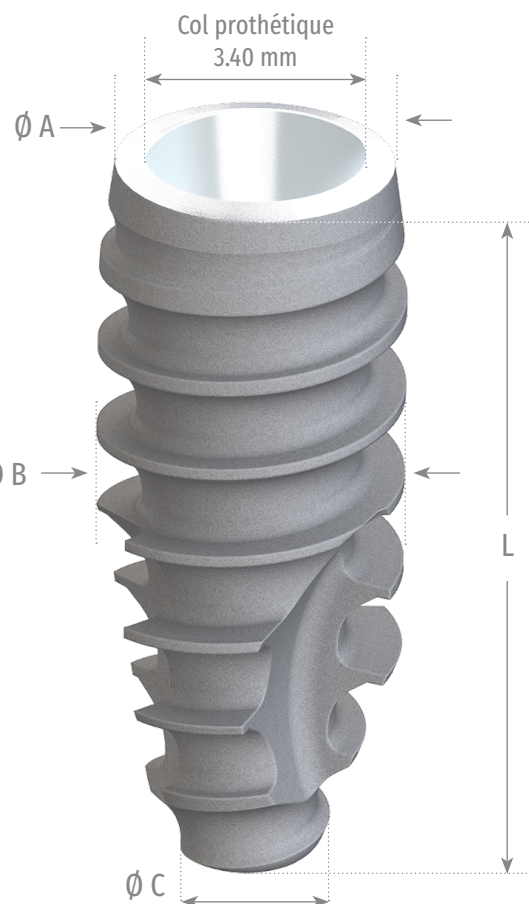

Matériau	Alliage de titane TA6V ELI F136 - EN ISO 5832-3/ASTM F136
Traitement de surface	Microsablage particules Al ² O ₃
Etat de surface	Rugosité : Ra 1.10 µm / 1.40 µm

Indications

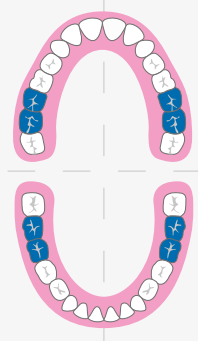

- Pour le remplacement des molaires maxillaire et mandibulaire.
- Stabilisation d'une prothèse amovible ou fixe (unitaire ou intercalaire). Le volume et la qualité osseuse doivent être suffisants pour supporter les implants.

Mise en place de l'implant infra-osseux jusqu'à 1 mm maxi.

Livré en standard avec

- Vis de cicatrisation anodisée «Lilas» Ø 5.50 mm - H 4.00 mm Réf. VCI554-CM
- Vis de couverture anodisée «Lilas» auto-cassante.



RETOUR

TÉLÉCHARGER



MASTER-C Ø 5.00 mm

easy implant®
By Visy

FICHE TECHNIQUE Réf. MC50

Protocole de forage (code couleur bleu)

Densité : **D4** **D3** **D2** **D1**

	FP1		Ø 2.00 / 2.70 mm	○ 1200 à 1500 tr/min.				
	FB-2.70/4.00		Ø 2.70 / 4.00 mm	○ 600 à 800 tr/min.				
	FB-4.00		Ø 4.00 mm	○ 600 à 800 tr/min.				
	FRB-4.25		Ø 4.25 mm	○ 600 à 800 tr/min.				
	FB-4.50		Ø 4.50 mm	○ 600 à 800 tr/min.				
	FC50		Ø 4.85 mm	○ 400 à 600 tr/min.				

Sur 2mm Sur 3mm

Préconisation de forage : **Sous irrigation constante.**

Préconisation du couple de forage : **5 à 10 N.cm.** Si le foret bloque à 10 N.cm, prévoir son remplacement.

⚠ La pointe du foret a une longueur de **1.00 mm**. Cette valeur doit être prise en compte au moment du forage en plus de la longueur de l'implant. Les valeurs **D1** à **D4** indiquent les densités pour lesquelles le foret peut être utilisé. N'utilisez pas une vitesse de rotation (en tours par minute) située en dehors de la fourchette indiquée.

Préconisation de vissage de l'implant : **30 tr/min** sans irrigation.


Protocole de mise en place




Système «No Touch»
implant et vis de couverture sécables.

Mise en place à l'aide des connecteurs «Lilas» :

• **MPI25-C** ou **-L**
pour une mise en place au contre-angle.

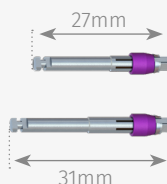

• **TMP25-C** ou **-L**
pour une mise en place manuelle.

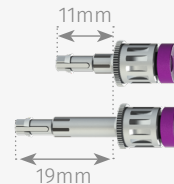

Etiquettes de traçabilité

REF: MS47-13 LOT: 20130999
IMPLANT MASTER-C
Ø4.75 H= 13 MM 100% EU F136
www.easyimplant.com

Dossier patient /
correspondant

REF: MS47-13 LOT: 20130999
IMPLANT MASTER-C
Ø4.75 H= 13 MM 100% EU F136
www.easyimplant.com

Carte Patient

REF: MS47-13 LOT: 20130999
IMPLANT MASTER-C
Ø4.75 H= 13 MM 100% EU F136
www.easyimplant.com

Laboratoire
de prothèse

REF: MS47-13 LOT: 20130999
IMPLANT MASTER-C
Ø4.75 H= 13 MM 100% EU F136
www.easyimplant.com

Bon de retour
pour garantie

Date: Site: Date: Site:

IMPLANT	IMPLANT
PROTHÈSE	PROTHÈSE

☐ Visable ☐ Scellée ☐ Amovible ☐ Visable ☐ Scellée ☐ Amovible
 Serrage prothèse: ☐ 15 ☐ 20 ☐ 25 N.cm Serrage prothèse: ☐ 15 ☐ 20 ☐ 25 N.cm

Chirurgie Prothèse Carte Patient

Certifications & Normes

Visy satisfait à la norme **ISO 13485** et à la directive européenne **93/42/CEE**, permettant d'apposer sur tous nos dispositifs l'agrément **CE 0051**.

CE 0051

ISO
13485

Garantie Easy Implant®

- Les produits Easy Implant® sont garantis 10 ans sans défaut de fabrication.
- L'acheteur reste seul responsable de l'utilisation qu'il fera des ces produits.
- Les pièces pourront, à la discrétion de Visy, être échangées ou remboursées.



Visy Implant

55, rue Uranus - Z.A.C. Altaïs - 74650 CHAVANOD (France) - Tel. : +33 (0) 450 450 498

@ support.technique@visyimplant.com easyimplant.com / visyimplant.com



FABRIQUÉ EN FRANCE




MASTER-C Ø 5.00 mm



TECHNICAL SHEET Ref. MC50


References	Ø A	Ø B	Ø C	L
MC50-7	4.60 mm	5.00 mm	3.00 mm	7 mm
MC50-8.5				8.5 mm
MC50-10				10 mm
MC50-11.5				11.5 mm
MC50-13				13 mm

LILAC Platform

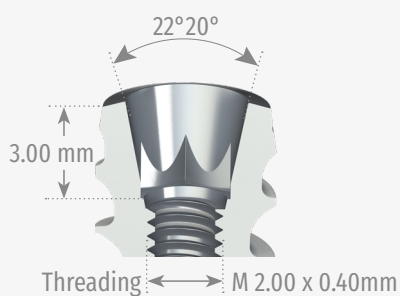


Conical connection indexed by a 2.48 mm hexagon.

The **Switching platform** allows to preserve the surrounding tissues which guarantees very good aesthetic results.

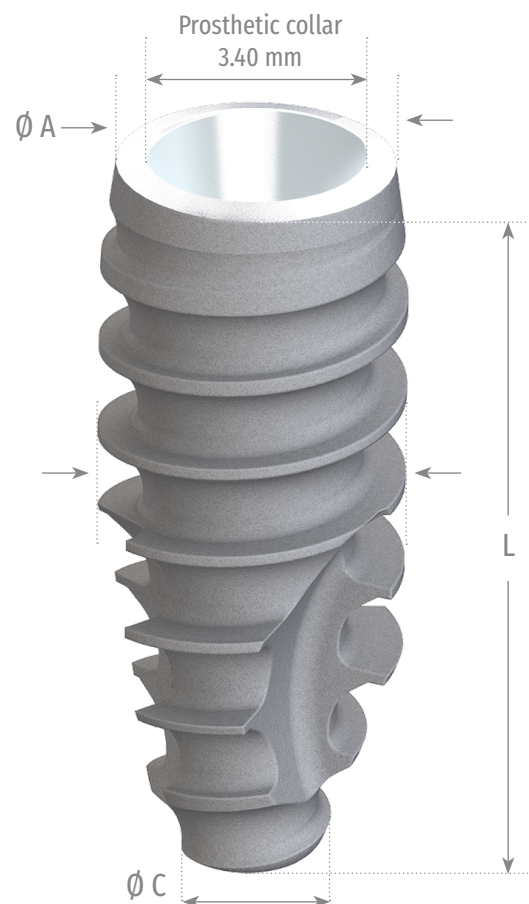

Material	Titanium alloy TA6V ELI F136 - EN ISO 5832-3/ASTM F136
Surface treatment	Microblasting particles Al ₂ O ₃
Surface condition	Roughness: Ra 1.10 µm / 1.40 µm

Indications

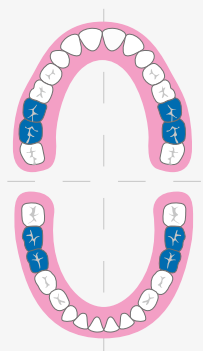

- For the replacement of the maxillary and mandibular molars.
- Stabilization of a removable or fixed prosthesis (unitary or interleaved). The volume and bone quality must be sufficient to support the implants.

Placement of the infra-osseous implant up to 1 mm maximum.

Supplied as standard with

- Anodized healing screw «Lilac»
Ø 5.50 mm - H 4.00 mm
Ref. VCI554-CM
- «Lilac» anodized breakable cover screw






MASTER-C Ø 5.00 mm



TECHNICAL SHEET Ref. MC50

Drilling sequence (blue color code)

Density: D4 D3 D2 D1

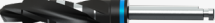FP1		Ø 2.00 / 2.70 mm	○ 1200 to 1500 RPM.				
FB-2.70/4.00		Ø 2.70 / 4.00 mm	○ 600 to 800 RPM.				
FB-4.00		Ø 4.00 mm	○ 600 to 800 RPM.				
FRB-4.25		Ø 4.25 mm	○ 600 to 800 RPM.				
FB-4.50		Ø 4.50 mm	○ 600 to 800 RPM.				
FC50		Ø 4.85 mm	○ 400 to 600 RPM.				

On 2mm On 3mm

Drilling recommendation: **Under continuous irrigation.**

Drilling torque recommendation: **5 to 10 N.cm.** If the drill bit blocks at 10 N.cm, plan to replace it.

⚠ The tip of the drill bit has a length of **1.00 mm**. This value must be taken into account during drilling in addition to the length of the implant. The values **D1** to **D4** indicate the densities for which the drill can be used.

Do not use a rotational speed (in revolutions per minute) outside the indicated range.

Implant insertion recommendation: **30 RPM** without irrigation.




Placement protocol




«No Touch» System
Breakable implant and cover screw.

Placement using «Lilac» implant mounts:


• **MPI25-C** or **-L**
Contra-angle placement.

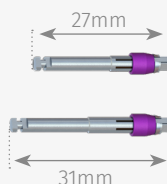

• **TMP25-C** or **-L**
Manual placement.

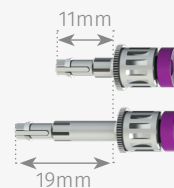

Traceability labels

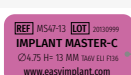

Patient record /
surgeon



Patient Card



Prosthesis
laboratory



Return form
for warranty



Certifications & Standards

Visy is **NF EN ISO 13485: 2016** certified and holder of **EC certificate** delivered by its notified body for the **93/42/CE** directive.

All products are subject to change without notice.



Easy Implant® Warranty

- Easy Implant® products have a 10 years warranty, free from manufacturing defects.
- The buyer remains solely responsible for the use he makes of the products.
- Every component replacements are left to Visy discretion.



Visy Implant

55, rue Uranus - Z.A.C. Altaïs - 74650 CHAVANOD (France) - Tel.: +33 (0) 450 450 498

@ support.technique@visyimplant.com easyimplant.com / visyimplant.com



MADE IN FRANCE